

TEST KIT PLUS - PRESUMPTIVE NARCOTIC SCREENING TEST INSTRUCTIONS

STEP 1




Knock the unopened ampoule several times against a hard surface, so the granules which may be sticking to the inside of the ampoule wall will fall downwards.

STEP 2



Take the top of the ampoule between the thumb and index finger and snap off the top with the ampoule breaker.

STEP 3

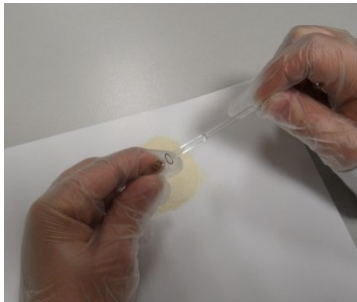

Use the spatula to insert the sample into the ampoule.

STEP 4



For samples in liquid form such as GHB, we advise to use the round end of the supplied spatula or otherwise use a pipette and insert one (1) drop into the ampoule.

STEP 5



Compare the color from the reagent granulate with the color line printed on the ampoule or as printed on the pack.

STEP 6



Since this test does not require acid neutralizers (as this is automatically done within the ampoule) you may throw the used ampoules in the trash or a glass recycling bin.

APPLICATION:

Test Kit Plus tests are used as a presumptive test to detect the presence of narcotics.

SENSITIVITY:

The test has a sensitivity; LDL (Lower Detection Level) of approx. < 0.3 mg depending on the purity of the sample.

COLOR REACTION:

The presence of narcotics is similarly indicated by a change in colour. In addition various medicines can produce similar or different colours. In all cases the colour change is fully developed within 1-5 minutes, further elapse of time produces only a slight colour change depending of the colour. The test should be evaluated after 5 minutes have elapsed.

STORAGE:

How to store the ampoules:
The shelf life is indicated on the package. The ampoules should be protected from light.
Temperatures -20oC (-68oF) +57 oC (+135oF)

SAFETY:

Keep the ampoules out of the reach of children.
In case the crystals come in contact with the eyes, skin or clothes, the effected areas have to be rinsed with water.
Note: No Liability can be accepted by the manufacturer / supplier, when the tests have been inappropriately used.

PACKING:

10 Test Ampoules, 10 Spatulas, 1 Instruction Sheet

For more information, visit:
<http://testkitplus.com>

INSTRUCTIONS DE TEST DE DÉPISTAGE PRÉSUMPTIF DE NARCOTIQUES

Étape 1




Placez le capuchon devant vous comme le montre l'image. Tapez avec l'ampoule plusieurs fois sur une table ou un autre objet dur de sorte que les cristaux tombent en bas.

Étape 2



Prenez l'ampoule entre le pouce et l'index et brisez la tête (soudure).

Étape 3

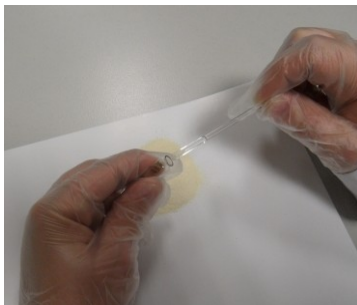

Utilisez la spatule pour introduire la substance suspecte dans l'ampoule.

Étape 4



Pour les substances suspectes en liquide (comme p.e. la GHB), utilisez les pipettes fournies et mettez une goutte dans l'ampoule.

Étape 5



Comparez la couleur avec le codage par couleur imprimé sur l'ampoule.

Étape 6



Les tests n'utilisant pas d'acide neutralisant, vous pouvez les jeter dans la poubelle commune des déchets ménagers.

APPLICATION:

Le test peut être utilisé pour l'identification, entre autres, de la Narcotiques, Précurseurs ainsi que des produits en dérivant.

SENSIBILITE:

La sensibilité (Lower detection Level) est < 0,3 mg en fonction de la pureté de la substance à tester.

CHANGEMENT DE COULEUR:

Lors de la présence de narcotiques, Précurseurs ou de produits dérivés, la couleur se transformera. (Déprimée comme sur l'ampoule et l'emballage)

Temps de réaction: la réaction (changement de couleur) se manifesterà déjà après quelques secondes. La lecture du test doit avoir lieu dans l'espace de 5 minutes. Lors de la présence de narcotiques. Après l'usage, fermez l'ampoule avec le capuchon en plastique. La spatule doit toujours être propre, il est donc recommandé de prendre à chaque fois une nouvelle spatule..

DUREE DE CONSERVATION:

N'exposez pas les ampoules à la lumière directe du soleil
Températures -20oC (-68oF) +57 oC (+135oF)

SECURITE:

Tenez les ampoules hors de portée des enfants. Dans le cas où le réactif (cristaux) entre en contact avec les yeux, la peau ou des vêtements, rincez alors avec de l'eau. La responsabilité n'incombe pas au producteur en cas d'une utilisation incorrecte.

EMBALLAGE:

1 MODE D'EMPLOI, 10 AMPOULES, 10 SPATULES

Visitez <http://TestKitPlus.com/fr> pour plus d'informations.